


MILAPHARM OVU test owulacyjny paskowy czuły 5 szt

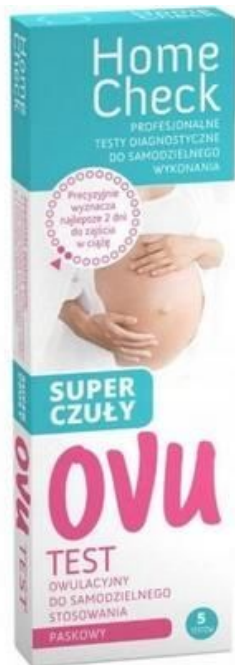

Cena: 8,50 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	MILAPHARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Test owulacyjny OVU super czuły paskowy
5 sztuk

Szybki test do jakościowego wykrywania hormonu luteinizującego (LH) w moczu w celu przewidywania czasu owulacji.

Czułość analityczna 25 mIU/ml.

Wysoka czułość, precyzyjny wynik, 99% dokładności, zwiększa szanse na zajście w ciążę.

Czułość diagnostyczna – 100%.

Swoistość diagnostyczna 100%.

Czułość i swoistość testu została sprawdzona na 900 próbkach zgodnie z międzynarodową normą WHO4.

Wynik w ciągu 3-8 minut. Nie odczytuj wyniku po upływie 10 minut.

Test owulacji-LH wykrywa poziomy hormonu luteinizującego LH w moczu, określając typowy szczyt, który poprzedza owulację, a następnie okres płodny.

Zastosowanie:

Test owulacji-LH jest stosowany przez kobiety, które chcą precyzyjnie określić swoje dni owulacji i zwiększyć swoje szanse na poczęcie.

Sposób użycia:

Test owulacji-LH to szybki test immunochromatograficzny, który wykrywa LH (hormon luteinizujący) za pomocą specjalnych przeciwciał monoklonalnych sprzężonych ze złotem zawartych w reaktywnym pasku, co pozwala przewidzieć okres owulacji i zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Wzrost i uwolnienie hormonu LH prowadzi do owulacji w ciągu następných 24/40 godzin, wartość graniczna ustalona jest na 25 mIU / ml, co jest uważane za normalną wartość hormonu LH. Rezultaty już po 5 minutach.

Owulacja występuje zwykle około 12/13 dnia cyklu miesięczkowego, dlatego wskazane jest wykonanie testu między 10 a 15 dniem, co zwiększa szanse na rozpoznanie szczytu owulacyjnego, a tym samym możliwości poczęcia.

Opakowanie zawiera:

5 kopertek foliowych każda zawiera 1 test
Instrukcja użytkowania wyrobu

Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE.
Posiada deklarację zgodności UE
Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

Producent: MILAPHARM